

## pCDH-CMV-ROR1-EF1a-CopGFP-T2A-Puro质粒说明书

pCDH-CMV-ROR1-EF1a-CopGFP-T2A-Puro 是以基恩科生物自研慢病毒骨架载体 pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro 为骨架载体构建，过表达小鼠 ROR1 基因，与载体 PMD2.G 和 Pspax2 配套进行慢病毒包装。

### 【质粒信息】

产品货号	GC020200849
产品规格	<input checked="" type="checkbox"/> 小提 (≥2μg) <input type="checkbox"/> 中提 (≥35μg) <input type="checkbox"/> 大提 (≥500μg)
基因名称	ROR1
基因别称	Ntrkr1; 2810404D04Rik
物种	小鼠(house mouse)
基因转录本	NM_013845.5
基因全长	2814bp
标签蛋白	无
原核抗性	Amp
真核抗性	Puro
荧光标记	GFP
高/低拷贝	高
培养温度	37°C
感受态	Stab13
CDS 序列	atgcaccgcccgcgccgcccgggacgcgccaccgctggcgctgctggccgcgctgctgctggc cgcacgcggggctgatgcccaagaacagagttgtcagtcagtgctgagctggtgcctacctgctctgg aacactcaagtgaatcgacaaaggttctacttaaccttgatgagccgatgaataacacacgctccc tggggcagactgcagaactgcactgcaaagtgtctgggaatccacctcccagatccgctggttcaagaat gatgcacctgtggtccaagaacctcggagaatctctccgggcaaccaactatggctctcggctcggatt agaaacctgacaccacagacactggttactccagtggtggaacaaatggcaagaaagtggtgtctac cactggtgctctgttcaaatgtggcctcctccgaccgcaagccaggatcctcagatgagatgaaga agatggattctgtagccgtaccgaggcattgcatgtgcacgattttatggcaaccgactgtgtatatgga gtctttgcatatgcaggggaaatagaaaatcagatcacagctgcctcaccatgattggcacctccagcca ttatctgataagtgtctcagttcggcatcctccttgctgccaactacgcctcccgtactgtgacgaaacctca tctgtccaaagcccgtgactgtgctgtagaatgtgaagtgtggagaatgtcctgtgtagacaga gtacattttgccagatcaatccatgattttgatgaggctgaagttaccaaactgtgaggatcctcccag ccagagagcccggaagctgcaaactgcatacggattggcattccatggcggatcctataataaaaaatca caaatgtacaatagcacgggtgtagactaccggggaaccgtcagtgtagcaagtctggacgccagtg cagccatggaattctcagtagccacacacacacagcttactgctctgcgcttccggagctcaacggaggc


[基因修饰细胞 \(敲除、敲入、点突变\)](#)    [基础实验服务 \(动物实验、载体构建、基因合成\)](#)  
[病毒包装 \(慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒\)](#)  
[试剂 \(常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒\)](#)



	<p>cactcctactgccgaaccctggcaaccagaaggaagctccctgggtctttaccttgatgaaaactttaag  tctgacctgtgtgacatcccagcatgtgattccaagattccaagagaagaataaaaatgaaatctgtac  attctgggtccaagtgtggcattcccctggctatcgcttctcttcttctcatctgtgtgtgccgaataacc  agaagtcttcatcaccaccagtcagaggcagcaaaaccgctcagaggacagaatgtggagatgtccat  gctcaatgcatacaagccaagagcaaggctaagagctgcctcttccgctgtgcgtttcatggaagaatt  gggtgaatgtaccttgaaaaatctataaggccatctctacctccaggcatggaccatgtcagctggt  ggctataaaaacctgaaagactataacaacccccagcagtggaagaaattcaacaggaagcctctctcat  ggctgaactacaccacccaatattgtatgcctcctcggagcctcaccaggaacaacctgtgtatgtct  cttgagtatatgaaccaggagacctccacgagttcctcatcatgcgatccccgattccgatgtcggctgt  agcagtgatgaagatgggacggcctcaatccagcctggaccatggtgatttcttacatagcaattcagat  cgcagctggatggagtacctgtctagtcacttctcgtgcacaaggaccttgagctgcacaattttaatt  ggagagcaactgcatgtaaaaattcagatcttggccttccagagaaattactctgctgattactatagg  tacagagtaagtcttactgcccacccgctggatccccctgaggccatcatgtacggcaattctcctccga  ttccgatctggtcttccgggtgtgtgtgggagatttccagcttggactccagccatattatgggttag  taatcaggaagtgtgaaatggtgcggaagcggcagcttaccatgttctgaagactgccgcccgcgc  atgtacagcctcatgaccgagtgctggaatgagatacctccaggagaccacgctttaagacatccacgt  ccggcttcgatcctggaggcctcctcaagtcacaccagctctaccacccctcgggtggaatgccacca  cgcagaccacttccctcagtgccagcctgtgagtaacctcagcaacccccgatttcccaattacatgttccc  gagccaaggattacacccagggtcagatcgctggttcttggccagcgatacctcagaaccagcgt  tcatccccatcaatggataccaatacctctggctatgcagccttccagctgcccactaccagcctgcagg  gcctcccagggtgattcagcactgccacctccgaagagtcggtcccaagcagcgcgacggatcgacc  agcactggccatgtggccagcttgcctcatcagatccaatcaggaagcaaacgttcttctgctacccac  atgtcaattccaatcaccctgggtggaatgggtatcactgttttggcaacaaatctcaaaaaccgtacaaaa  tagactcaaaacaatcgtcttcttgggactcccatatcctgggacaccgaatctatgatttctgcaga  agtgtaa</p>
--	--

**【质粒图谱】**

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#)      [基础实验服务（动物实验、载体构建、基因合成）](#)  
[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)  
[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)

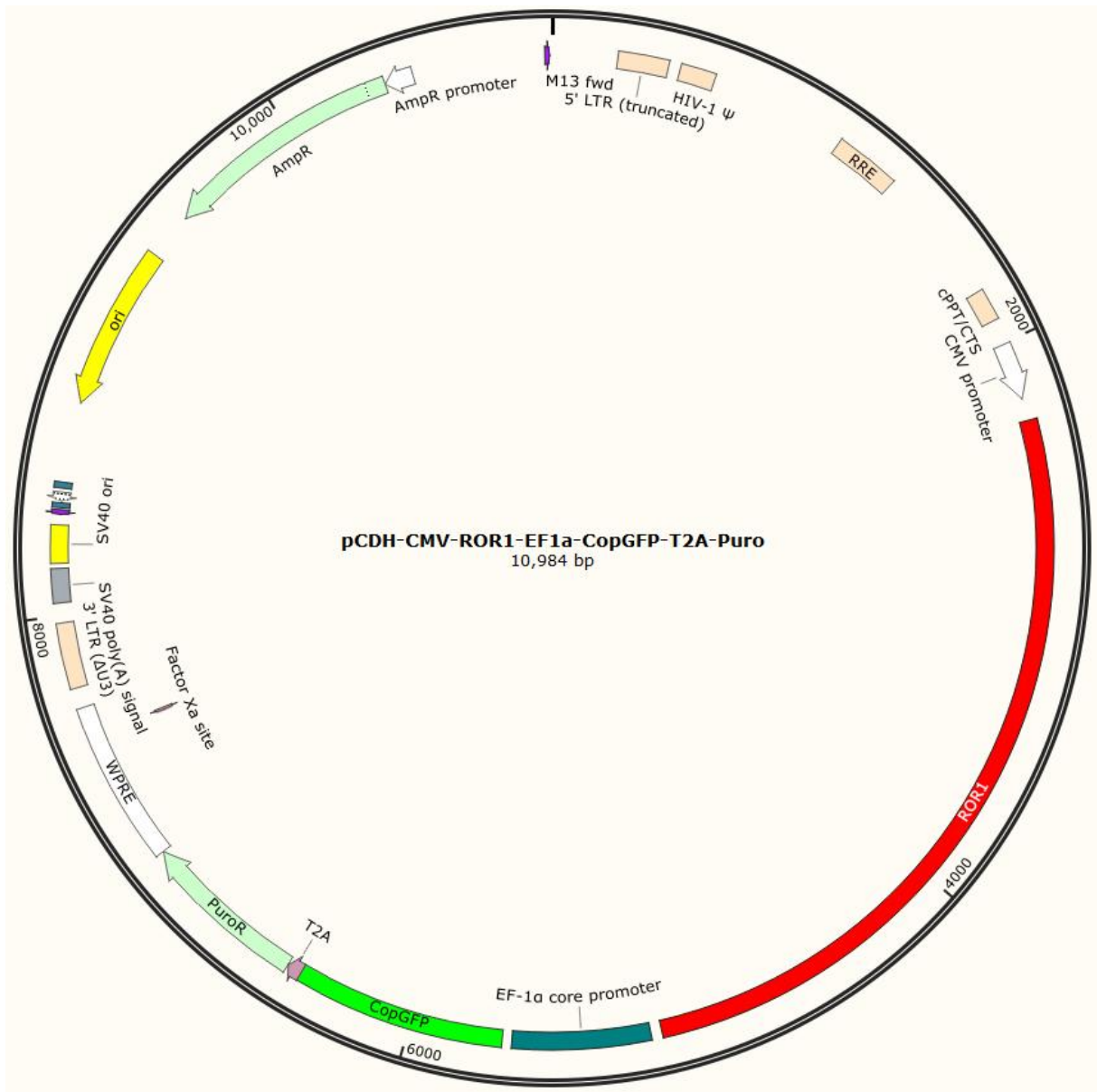

### 【保存与扩增】

1. 保存：质粒置于-20°C 保存，穿刺菌置于 4°C 保存
2. 质粒扩增：收到质粒后离心，-80°C 取出感受态细胞，取 1uL 质粒加至 100ul 感受态中，冰浴 30min；42°C 热击 90s，再冰浴 2min，混合液体直接涂板，倒置培养 12-16h，挑单克隆至液体培养基中，震荡 12-16h，提取质粒。
3. 菌液扩增：经划线培养后挑克隆至相应抗性 LB 培养基中。

[基因修饰细胞（敲除、敲入、点突变）](#)      [基础实验服务（动物实验、载体构建、基因合成）](#)

[病毒包装（慢病毒、非整合慢病毒、腺病毒、腺相关病毒、病毒样颗粒蛋白、脂质体纳米颗粒）](#)

[试剂（常规试剂、感受态、基因敲除敲入点突变试剂盒、滴度检测试剂盒）](#)



## 【注意事项】

- 本质粒未经基恩科 (Genecaere) 生物书面许可不得用于任何商业用途, 也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 【使用说明】

首次使用 2 $\mu$ g 包装的本产品时, 请先取少量本质粒转化大肠杆菌, 进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。  
抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定, 或通过测序进行鉴定。



- 扫码关注基恩科公众号获取更多资讯
- Website [www.genecarer.com](http://www.genecarer.com)
- Service hotline 029-84613682